



VistaCool 3™

Sistema de reducción térmica con conexión directa al drenaje para el agua residual del autoclave

Elimina la necesidad de botellas de condensación en autoclaves

enfriando el agua residual del esterilizador y eliminándola directamente por el desagüe de forma automática.



Protege los gabinetes

Ayuda a prevenir la formación de hongos, moho, descomposición y óxido originados por los derrames y los entornos húmedos creados por la expulsión proveniente de botellas de condensación.



Protege los drenajes

Previene daños en las tuberías causados por el agua residual del autoclave. Su sistema antirreflujo integrado cumple o excede los códigos locales para tuberías.



Protege al personal

Elimina la necesidad para el personal del consultorio de vaciar las botellas de agua caliente manualmente.




Ahorra tiempo

¡Sistema sin electricidad, autorregulable que ahorra tiempo al personal y no requiere mantenimiento por parte del usuario!




Instalable en cualquier lugar.

El innovador diseño del nuevo VistaCool 3 proporciona todas las mismas ventajas que sus predecesores ocupando menos espacio. Los clips de montaje incluidos con el sistema y la línea de drenaje presurizada permiten instalarlo en vertical u horizontal en casi cualquier ubicación.

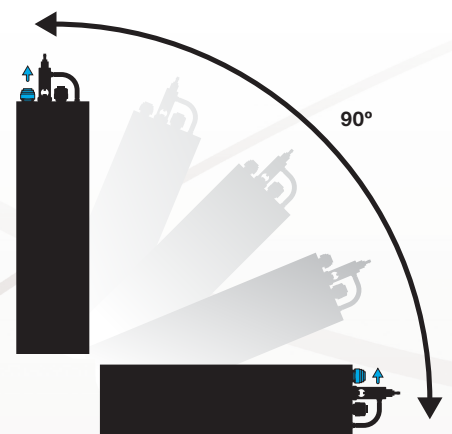

COLTENE

Especificaciones del sistema

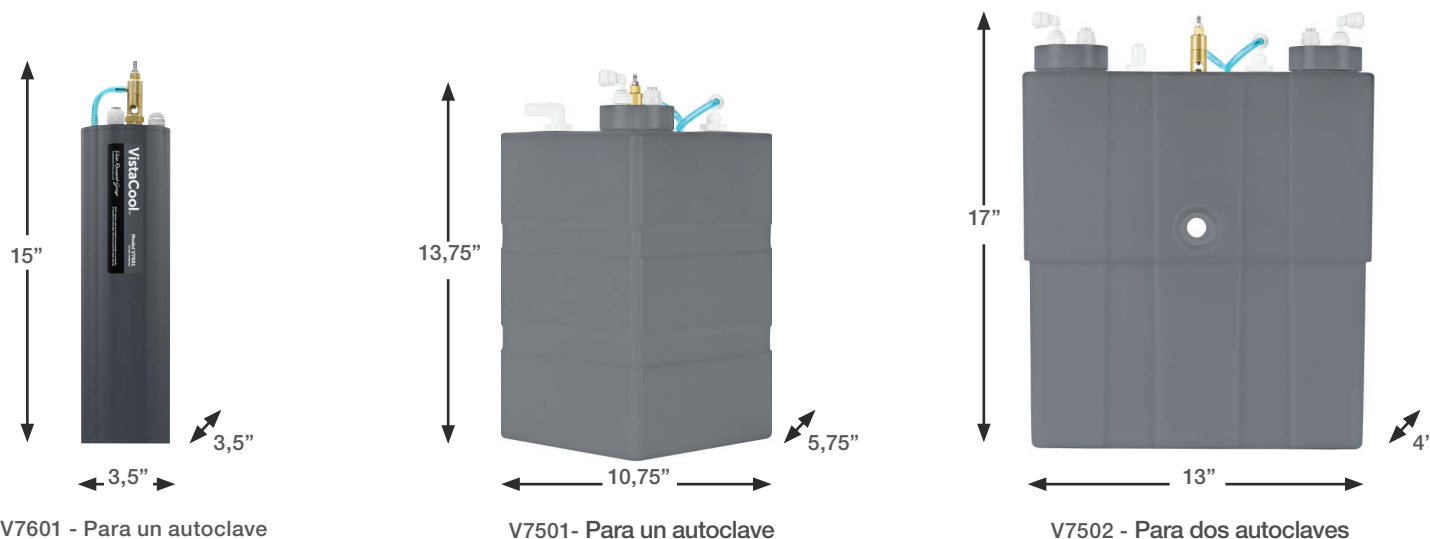


Observación: Los soportes del tanque, opcionales y ajustables, elevan la altura de instalación de los modelos V7501 y V7502 entre 1/2" y 5" en incrementos de media pulgada. Solicite S7545 para V7501; solicite S7547 para V7502.

Requisitos de instalación

Conexión de 1/4" para el suministro de agua fría: ¡Los herrajes de suministro, la válvula de suministro de agua, la línea de alimentación de agua fría y los sistemas antirreflujo VistaCheck™ Dual Check certificados por la CSA están incluidos! Accesorio de separación de aire disponible por separado, si así lo estipulan los requisitos locales. Sensor(es) termal(es) en la línea incluidos para garantizar que el agua residual esté lo suficientemente fría para eliminarla por el desagüe.

Accesorios recomendados

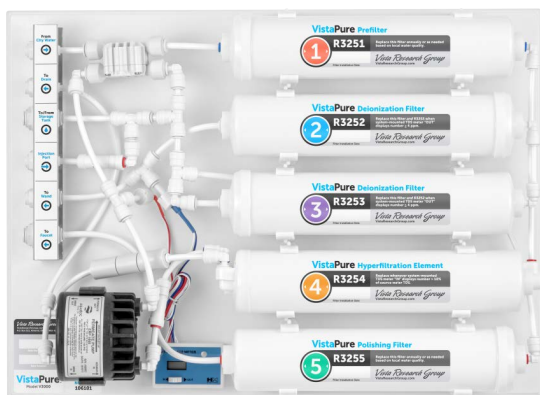

VistaPure™

Filtración de agua

Proporciona dos grados de agua de alta calidad para autoclaves, recipientes dentales, limpiadores ultrasónicos y el ciclo de enjuague de los lavadores de instrumentos.

V3000



VistaPure™ AutoFill

Repone cualquier modelo nuevo o antiguo de los autoclaves STATIM y BRAVO™ con agua destilada de calidad, permitiendo una auténtica comodidad sin necesidad de usar las manos.

S3020 - AutoFill para STATIM

S3030 - AutoFill para BRAVO

Distribuido por:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road
North York, ON M3B 3P9 / Canadá
T +1 416 445 1600
TF +1 800 667 7733
customerservice@scican.com

VistaPure y VistaCool son fabricados por:
Vista Research Group / Crosstex International, Inc.
1733 W. Parkside Lane
Phoenix, AZ 85027 / EE. UU.
TF +1 800 531 2221
VistaResearchGroup.com

www.scican.com

COLTENE

STATIM es una marca registrada y BRAVO es una marca comercial de SciCan Ltd. VistaPure y VistaPure son marcas registradas de Vista Research Group.